



**Cucitrice cutanea e pinza per la rimozione delle graffette cutanee
Manuale**

N. cat.: SSG-15W, SSG-25W, SSG-35W, SSG-55W, SSG-15R, SSG-25R, SSG-35R, SSG-55R, SSG-15H, SSG-25H, SSG-35H, SSG-55H, SRG-U

 <p>Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, Cina</p>	<p>Informazioni di contatto: Telefono: +86 0532-86769190 Telefax: +86 0532-86767322</p>	<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table> <p>MDML INTL LTD., 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co . Cork, P85 K230, Irlanda</p>	EC	REP	
EC	REP				

Indicazioni:

CUCITRICE CUTANEA – il prodotto è destinato alla chiusura di ferite chirurgiche e di altro tipo in una vasta gamma di trattamenti nel campo della chirurgia generale, toracica, ostetrica, ginecologica, ortopedica, cardiovascolare, urologica e plastica.
PINZA PER LA RIMOZIONE I PUNTI DI SUTURA – il prodotto è destinato alla rimozione delle graffette cutanee che sono state utilizzate per chiudere la ferita.

Controindicazioni:

Le cucitrici cutanee non devono essere utilizzate se non è possibile mantenere una distanza di 5 mm tra la superficie della pelle suturata e i vasi sottostanti, i nervi importanti, gli organi interni, le ossa e il tessuto connettivo sotto forma di tendini e legamenti.

Descrizione d'uso:

CUCITRICE CUTANEA

1. Sollevare la cute, capovolgerla e abbinare i bordi insieme con una pinzetta.
2. Posizionare la cucitrice sopra il centro dei bordi capovolti della pelle trasversalmente alla linea di taglio e mantenere una distanza di circa 1 – 2 mm sopra la pelle per consentire un piccolo spazio tra la traversa superiore della graffetta messa e la superficie della pelle, che in seguito faciliterà la rimozione della graffetta .
3. Chiudere la cucitrice premendo il grilletto con un movimento continuo fino a raggiungere il blocco.
4. Rilasciare il grilletto per liberare la graffetta.

PINZE PER LA RIMOZIONE DELLE GRAFFETTE DELLA PELLE

1. Inserire le mascelle inferiori della pinza (con uno spazio tra di loro) sotto la traversa superiore della graffetta.
2. Stringere i manici delle pinze fino a raggiungere il blocco. Non sollevare né tirare la pinza.
3. Assicurati che la graffetta abbia cambiato forma ad una forma assomigliante la M. Sollevare la pinza tirando delicatamente le estremità della graffetta dalla pelle.

Avvertenze e precauzioni:

1. Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Si consiglia di inserire graffette ogni 5 mm. Per ferite inferiori a 5 cm, si raccomanda di utilizzare una cucitrice da 15 graffette, ferite da 5 a 10 cm con 25 graffette, e per ferite da 10 a 15 cm con 35 graffette mentre per le ferite da 15 a 25 cm con 55 graffette.
3. Le prime 3 graffette devono essere sparate all'esterno della ferita. Assicurati che siano stati modellate correttamente e solo allora usa una cucitrice.
4. Premere sempre il grilletto fino in fondo. Il rilascio prematuro del grilletto e la nuova premuta di esso può attivare il colpo della successiva graffetta prima che la precedente venga liberata. Questo può bloccare la cucitrice.
5. Le graffette non devono rimanere nel corpo per più di 30 giorni.
6. Le graffette rimosse sono affilate e potenzialmente pericolose. Seguire le procedure ospedaliere per proteggere se stessi e gli altri membri del personale da lesioni accidentali.

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato solo da personale medico qualificato. Lo strumento richiede un corretto smaltimento dopo l'uso.



Prodotto monouso



Sterilizzazione con ossido di etilene




Proteggere dall'umidità



Leggere le istruzioni per l'uso



Fabbricante

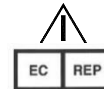

Attenzione, si prega di leggere allegata documentazione

Non risterilizzare

Non utilizzare in caso dell'imballaggio danneggiato

Rappresentante autorizzato nell'UE